


## JAK UDĚLAT TEST NIPT

S pacientkou, která má o toto vyšetření zájem, je nutné vyplnit žádanku a vyplnit a podepsat informovaný souhlas s genetickými testy. Jeden výtisk informovaného souhlasu dostane pacientka a druhý se odešle společně se vzorky do samplingového centra. Pacientka musí být informována o typu testu a způsobu jeho vyhodnocení.

### Odběr krve

Odběr krve se provádí do 2 zkumavek Streck cell – free DNA BCT (10ml), která je součástí odběrového setu NIPT. Na zkumavku napište jméno pacientky, rodné číslo a datum odběru. **Po odběru krve je nutné zkumavku 10x obrátit o 180° (viz.obrázek) a skladovat ji při pokojové teplotě.**

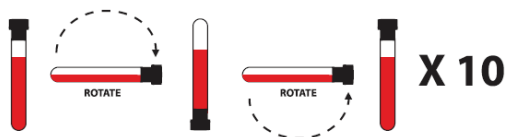

### Transport

Označenou zkumavku s krví vložte do Cool Transport Container (součást odběrového setu), do polystyrenové krabičky a do papírové přepravní krabice UN 3373. Ke každému vzorku přiložte originál podepsaného informovaného souhlasu a vyplněnou žádanku. Zkumavku s krví je vhodné odeslat v den odběru. Krev musí být zpracována v laboratoři Genetika Plzeň nejpozději do 45 hodin po odběru. Doporučujeme odběr provádět v dopoledních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek.

### Objednání transportu

Dopravu objednávejte nejlépe den před odběrem.  
Při objednání přepravy zdůrazněte, že se jedná o neinfekční biologický materiál.

Adresa samplingového centra:  
Genetika Plzeň, s.r.o.,  
Parková 1254/11a , Plzeň – Černice,  
Telefon: 377 241 529  
Kontaktní osoba: Bc. Lacyková Hana, tel.: +420 731 433 568

### Výsledek

Výsledek testu bude zaslán na uvedenou adresu na žádance nejpozději do 3 týdnů od přijetí vzorku laboratoří BGI a po zaplacení testu.

V případě jakýchkoliv dotazů a objednání nových odběrových kitů nás můžete kontaktovat:  
[recepce@genetika-plzen.cz](mailto:recepce@genetika-plzen.cz), Bc. Hana Lacyková, tel.: 731 433 568